


select® EpiPlus® Ellenbogenbandage



Elbow Support | Bandage pour coude | Codera | Fasciatura per gomiti

- ⊕ SOFTflex Plus-Funktionsgestrick
- ⊕ Kühlende **BREEZE** Komfort-Faser
- ⊕ Pelottendruck individuell dosierbar

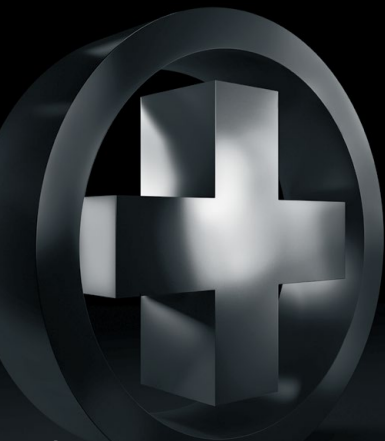

select®



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Art.-No.
122 700

Die erste Wahl für Anspruchsvolle.

select[®] - unsere hochwertigste Bandagenserie überzeugt in ihrer Funktion und hochwertigen Produktausstattung. Sie bietet exklusive Mehrwerte, von denen anspruchsvolle Patienten profitieren.



select[®]



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.[®]

DE Liebe Kundin, lieber Kunde,

schön, dass Sie sich für ein hochwertiges Medizinprodukt der BORT GmbH entschieden haben. Mit der **BORT select® EpiPlus® Ellenbogenbandage** haben Sie von Ihrem medizinischen Fachhändler ein Produkt bekommen, das höchsten medizinischen, funktionellen und qualitativen Ansprüchen entspricht.

Ausgesuchte hochwertige Materialien in Verbindung mit der kühlenden **BREEZE** Komfort-Faser erfüllen höchste Ansprüche und sorgen für eine patientenfreundliche Anwendung.

Die **BORT select® EpiPlus® Ellenbogenbandage** unterstützt die geschädigten Gewebestrukturen. Die Kompression der Bandage unterstützt die Haltefunktion der Bänder und entlastet so das Gelenk. Gleichzeitig hilft die Bandage Fehlbewegungen weitgehend zu vermeiden.

In Bewegung bewirken das komprimierende Gestrick und die Silikonpelotte einen Massageeffekt, der Schwellungsneigungen reduziert, bestehende Schwellungen rückbilden hilft und somit den Heilungsprozess beschleunigt. Gezielter Druck wirkt schmerzlindernd und zugentlastend an den Sehnenansätzen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Die **BORT select® EpiPlus® Ellenbogenbandage** so anlegen, dass die Komfortzone in der Ellenbeuge positioniert ist. Hierbei ist darauf zu achten, dass Sie durch die Aussparungen der Silikonpelotte den äußeren und inneren Gelenkfortsatz ertasten können.

Das zirkuläre Stabilo®-Band ermöglicht eine zusätzliche individuelle Regulierung des Druckes auf die Silikonpelotten.

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie.

KONTRAINDIKATIONEN

Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt, Latexallergie.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

66 % Polyamid

29 % Elastodien/Latex

5 % Elasthan

WICHTIGER HINWEIS

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt.

Die **BORT select[®] EpiPlus[®] Ellenbogenbandage** unterstützt den Heilungsprozess insbesondere bei Aktivität. Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, müssen Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs vermieden werden. Bei Taubheitsgefühl bitte die Bandage sofort lockern und ggf. abnehmen.

Bitte suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden oder Verschlimmerung der Beschwerden Ihren Arzt auf.

Während der Tragedauer der Bandage bitte keine Creme oder Salbe verwenden, da diese das Material zerstören können.

Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

The first choice for most demanding people.

select[®] - our highest-quality series of supports convinces for its functionality and the excellent product components. It offers unique characteristics, which satisfy even the most demanding patients.



select[®]



BORT. Benefit at your side.

EN Dear Customer,

Thank you for choosing a premium medical product manufactured by BORT GmbH. With the **BORT select® EpiPlus® Elbow Support**, your specialist medical provider has supplied you with a product that meets the highest medical, functional and quality standards.

Selected high-quality materials together with cooling luxury **BREEZE** fibre meet the highest standards and ensure patient-friendly use.

The **BORT select® EpiPlus® Elbow Support** supports the damaged tissue structures. The support's compressive action supports the postural function of the ligaments thus relieving the joint. At the same time, the support helps prevent incorrect movement.

On the move, the compressive knitting and the silicone pads combine to deliver a massage effect, which reduces the tendency for swelling, helps reduce existing swellings and thus accelerates the healing process. Pressure applied at specific points has a pain-relieving effect and relieves strain on the ligament attachments.

INSTRUCTIONS FOR USE

Fit the **BORT select**® **EpiPlus**® **Elbow Support** in such a way that the comfort zone is positioned in the crook of the arm. Make sure that you can touch the outer and inner articular process through the gaps in the silicone pad.

The circular **Stabilo**® strap allows further adjustment of the pressure on the silicone pads.

INDICATIONS

Chronic post-traumatic or post-operative irritations of soft tissues in the area of the elbow joint, Epicondylitis (acute or chronic), tendomyopathy.

CONTRAINDICATIONS

Peripheral arterial occlusive disease (PAOD), lymphatic drainage disorders and indistinct soft tissue swellings remote from the applied aid, sensory loss and blood flow disorders in the affected body part, skin disorders in the treated part of the body, latex allergy.

COMPOSITION

66 % Polyamide

29 % Elastodies/Latex

5 % Spandex

IMPORTANT NOTE

No reutilisation – this medical device is meant for the care of one patient only.

The **BORT select**® **EpiPlus**® **Elbow Support** supports the healing process particularly during activities. If instructed to wear the support at night, you must take precautions to avoid impairment of blood circulation.

If you experience numbness, please loosen the support immediately and, if necessary, remove it.

If you suffer from persistent complaints or if you experience worsening complaints, you should consult with your doctor.

Please do not apply any creams or ointments at any time while wearing the support as these can destroy the material.

The product contains latex and can trigger allergic reactions.

Produit de premier choix pour les plus exigeants.

select[®] - notre série de bandages la plus prestigieuse vous convaincra par ses fonctions et son matériel de qualité premium. Elle offre une plus-value exclusive aux patients exigeants.



select[®]



BORT. L'extra à votre côté.

FR Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi un dispositif médical de qualité de la société BORT GmbH. Avec le **bandage pour coude select® EpiPlus® de BORT**, votre distributeur médical spécialisé vous a fourni un produit répondant aux exigences les plus hautes en termes de soin, de fonctionnalité et de qualité. Grâce aux matériaux sélectionnés pour leur qualité supérieure et les fibres **BREEZE** qui garantissent confort et fraîcheur, ce produit répond aux exigences les plus élevées tout en offrant une utilisation adaptée aux besoins du patient.

Le **bandage pour coude select® EpiPlus® de BORT** soutient les structures tissulaires lésées. La compression du bandage renforce la fonction de maintien des ligaments et soulage ainsi l'articulation. Simultanément, le bandage contribue à éviter les faux mouvements.

Lors d'un mouvement, le tricotage à compression et la zone matelassée en silicone agissent comme un massage, qui aide à limiter le gonflement et à réduire les tuméfactions existantes, accélérant ainsi le rétablissement. Une pression ciblée calme la douleur et soulage la traction exercée sur les tendons.

MODE D'EMPLOI

Poser le **bandage pour coude select® EpiPlus® de BORT** de sorte que la zone de confort se situe dans le pli du coude. Il faut alors veiller à ce que vous puissiez toucher le prolongement intérieur et extérieur de l'articulation par les échancrures des zones matelassées en silicone.

La bande circulaire Stabilo® rend possible une régulation individuelle supplémentaire de la pression sur les zones matelassées en silicone.

INDICATIONS

Etats irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires en région de l'articulation du coude, épicondylite (aigüe ou chronique), tendopathies.

CONTRE-INDICATIONS

Maladie artérielle occlusive périphérique (MAOP), problèmes d'écoulement lymphatique, ou encore en présence de tuméfactions des parties molles à des endroits éloignés du bandage mis en place, perturbation de la sensibilité et de la circulation sanguine au niveau de la région corporelle traitée, maladies de la peau dans la partie du corps soignée, allergie au latex.

COMPOSITION DES MATIÈRES

66 % Polyamide

29 % Élastodiène/Latex

5 % Élasthane

NOTE IMPORTANTE

Pas de réutilisation – ce produit est destiné à l’usage d’un seul patient.

Le **bandage pour coude select® EpiPlus® de BORT** renforce le processus de guérison, en particulier pendant les moments d’activité. Si l’ordonnance mentionne le port du bandage la nuit, il faut faire attention à ne pas bloquer la circulation sanguine. En cas de sensation d’engourdissement, desserrer immédiatement le bandage et le retirer le cas échéant.

Faire appel à un médecin en cas de troubles persistants ou d’aggravation des symptômes.

Pendant toute la durée de port du bandage, n’appliquer aucune crème ou pommade car ces dernières peuvent désagréger le matériau du bandage.

Le produit contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques.

La mejor elección para los más exigentes.

select[®] - nuestra serie de bandas de máxima calidad convence por su funcionalidad y por los excelentes componentes del producto. Unas características excepcionales que satisfarán hasta los pacientes más exigentes.



select[®]



BORT. La excelencia siempre a su lado.

ES Estimado cliente:

Nos alegra que haya elegido un producto médico de alta calidad de BORT GmbH. Con la **codera select® EpiPlus® de BORT** usted ha recibido de su distribuidor especializado un producto que cumple las máximas exigencias médicas, funcionales y cualitativas.

Los materiales de alta calidad, el tejido **BREEZE** comfortable para la piel y con acción refrigerante cumplen con los más altos estándares y garantizan un uso adaptado a las necesidades del paciente.

La **codera select® EpiPlus® de BORT** sostiene las estructuras de tejido lesionadas. La compresión del vendaje ayuda en la función de soporte de los ligamentos y alivia así la articulación. Al mismo tiempo, este vendaje contribuye a evitar malos movimientos.

Con el movimiento, el tejido de punto compresor y la almohadilla de silicona producen un efecto de masaje que reduce la tendencia a la hinchazón, ayuda a la regresión de las inflamaciones existentes y, por consiguiente, acelera el proceso de curación. La presión selectiva actúa aliviando el dolor y la tracción en las inserciones tendinosas.

INSTRUCCIONES DE USO

Colocar la **codera select® EpiPlus® de BORT** de modo que la zona de confort quede situada en el pliegue del codo. Asegúrese de que puede palpar el cóndilo exterior e interior a través de las cavidades de la almohadilla de silicona.

La cinta circular **Stabilo®** permite una regulación adicional individual de la presión sobre las almohadillas de silicona.

INDICACIONES

Irritaciones crónicas, posttraumáticas o postoperatorias de tejidos blandos del área de la articulación del codo, epicondilitis (aguda o crónica), tendinopatía.

CONTRAINDICACIONES

Enfermedad arterial oclusiva periférica (EAOP), trastornos linfáticos, incl. hinchazón de origen desconocido del tejido blando en zonas alejadas de la tratada, trastornos sensitivos y circulatorios de la región corporal atendida, enfermedades cutáneas en la zona del cuerpo a tratar, alergia al látex.

COMPOSICIÓN

66 % Poliamida

29 % Elastodieno/Látex

5 % Elasthan

NOTA IMPORTANTE

Producto no reutilizable destinado a un solo paciente.

La **codera Select® EpiPlus® de BORT** refuerza el proceso de recuperación, en particular en caso de actividad. Si por prescripción médica se establece su uso nocturno, ajustar la compresión adecuadamente para evitar problemas de circulación sanguínea. En caso de entumecimiento, aflojar inmediatamente el vendaje y retirarlo cuando proceda.

En caso de problemas persistentes o de empeoramiento de los síntomas, consultar con el médico.

Durante el uso del vendaje no aplicar ninguna crema ni pomada, ya que podrían deteriorar el material.

Este producto contiene látex que puede causar reacciones alérgicas.

La prima scelta per i più esigenti.

select® - la nostra serie di tutori di maggiore qualità convince per la sua funzionalità e gli eccellenti componenti del prodotto. Offre vantaggi esclusivi, da cui traggono profitto i pazienti più esigenti.



select®



BORT. L'extra al vostro fianco.

IT Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto uno dei prestigiosi dispositivi medici della BORT GmbH. Con la **fasciatura per gomiti BORT select® EpiPlus®**, il Suo rivenditore specializzato in dispositivi medici Le ha offerto un prodotto in grado di soddisfare le più alte esigenze in termini clinici, di funzionalità e di qualità.

Materiali selezionati di alta qualità in abbinamento al confortevole tessuto **BREEZE** con funzione di raffreddamento e soddisfano i più alti standard e garantiscono un utilizzo che va incontro alle esigenze del paziente.

La **fasciatura per gomiti BORT select® EpiPlus®** dà sostegno alle strutture di tessuto danneggiate. La compressione esercitata dalla fasciatura favorisce la funzione di immobilizzazione dei legamenti, alleggerendo così il carico sull'articolazione. Allo stesso tempo, la fasciatura aiuta anche a evitare movimenti non appropriati.

Quando si è in movimento, la parte comprimente in maglia e la pelotte di silicone massaggio producono un effetto massaggiante che riduce la probabilità di gonfiori e aiuta a far riassorbire gonfiori già esistenti, contribuendo così ad accelerare il processo di guarigione. La pressione mirata ha un effetto sedativo e "ammortizza" i movimenti bruschi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare la **fasciatura BORT select® EpiPlus®** in modo tale che la zona comfort coincida con l'incavo del braccio. Approfittando degli spazi liberi che lascia la pelotte di silicone, assicurarsi di alleggerire il carico dal prolungamento interno ed esterno dell'articolazione.

La benda circolare **Stabilo®** permette inoltre di regolare la pressione sulle pelotte di silicone in base alle esigenze individuali.

INDICAZIONI

Condizioni irritative croniche, post-traumatiche o post-operatorie dei tessuti molli nella regione dell'articolazione del gomito, epicondilite (acuta o cronica), tendinomiopatie generalizzate.

CONTROINDICAZIONI

Arteriopatia ostruttiva periferica (AOP), disturbi del flusso linfatico e gonfiori poco chiari dei tessuti molli distanti dall'ausilio applicato, disturbi della sensibilità e della circolazione nelle regioni anatomiche interessate dal trattamento, patologie cutanee nella zona del corpo interessata, allergia al lattice.

COMPOSIZIONE DEI MATERIALI

66 % Poliammide

29 % Elastodiene/Lattice

5 % Elasthan

NOTA IMPORTANTE

Non riutilizzare – questo ausilio medico è destinato all'utilizzo di un solo paziente.

La **fasciatura per gomiti BORT select® EpiPlus®** favorisce il processo di guarigione, soprattutto se affiancato da attività fisica. Nel caso sia stata prescritta l'applicazione nelle ore notturne, fare in modo di evitare di compromettere la circolazione sanguigna. In caso di intorpidimento, allentare immediatamente ed eventualmente rimuovere la fasciatura.

Se i disturbi dovessero persistere o aggravarsi, consultare un medico.

Mentre si indossa la fasciatura, evitare l'utilizzo di creme o pomate, poiché possono rovinare il materiale.

Il prodotto contiene lattice e può provocare reazioni allergiche.



PFLEGEHINWEISE

Die Bandage mit lauwarmem Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen. Keinen Weichspüler verwenden. Klettverschluss schließen, um die Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen und an der Luft trocknen. Hitze vermeiden.

CARE INSTRUCTIONS

Hand-wash the support in lukewarm water using a mild detergent. Do not use fabric softeners. Close the Velcro closure to avoid damaging other items being washed. Shape by hand and allow dry in the open air. Avoid heat.

ENTRETIEN

Laver le bandage à la main, à l'eau tiède avec un détergent doux. Ne pas utiliser d'assouplissant. Rabattre les fermetures Velcro pour éviter d'abîmer les autres vêtements à laver. Mettre en forme et laisser sécher à l'air. Éviter la chaleur.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

Lavar el vendaje a mano en agua tibia y con un detergente suave. No utilizar ningún suavizante. Cerrar el adhesivo de Velcro para evitar daños en otras prendas de la colada. Estirarlo y secarlo al aire. Evitar el calor.

CONSIGLI SULLA MANUTENZIONE

Lavare la fasciatura a mano con acqua tiepida e detersivo per capi delicati. Non utilizzare ammorbidenti. Chiudere il dispositivo di tenuta in Velcro per evitare di danneggiare altri capi. Ridare la forma e far asciugare all'aria aperta. Non esporre a fonti di calore.

Größen / Sizes / Dimensions / Tamaños / Misure



Umfang Unterarm 5 cm unter Ellenbogengelenk

Circumference 5 cm below elbow joint


Tour à 5 cm sous l'articulation du coude

Circunferencia 5 cm debajo de la articulación del codo

Circonfenza 5 cm al di sotto dell'articolazione del gomito

xx-small	20 – 22 cm
x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium.	26 – 28 cm
large.	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm
xx-large	32 – 34 cm

1 cm = 0,3937 inch

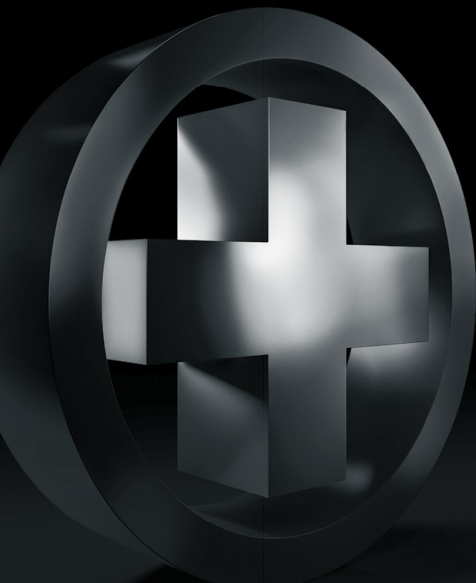

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Spezialartikel 
03.0.9028 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100



BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com



Stand: Oktober 2018

0122700/D-10/18

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®