

NEUHEITEN 2023



BORT StabiloBasic
spezialweit
für die Versorgung
kräftiger Körperperformen



Generation

Besonders einfach anzulegende
Schulterorthese

Knieorthesen

Jetzt in Med- und Generation-
Modellen: innovatives BORT
Polkurvengelenk

Kniebandagen in Doppel-Plus-Größen

Für besonders starke Ober-
schenkelumfänge

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

NEU

BORT Generation Schulterorthese

Besonders einfach anzulegende Schulterorthese



Einhängeverschluss-System
für eine einfache und komfortable
Handhabung

Speziell konstruierte
Rückenspange
für einen einfachen Anlege-
prozess der Schulter- und
Taillengurte

REF 215 700 | Pos.Nr. 23.09.01.0xxx

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit Tragetasche zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Taillen- und Schultergurt zur sicheren Fixierung von Schulter und Arm

FARBE: ■ blau



DAS GENERATION-PLUS

- Einfacher Anlegeprozess von Schulter- und Taillengurt
- Positionierhilfe am Rücken verhindert Verdrehen der Gurte
- Schnellverschluss zur einfachen und sicheren Fixierung der Armtasche am Gurtsystem

GRÖSSEN

Körpergröße

Größe 1	bis 160 cm
Größe 2	160 – 180 cm
Größe 3	über 180 cm

rechts oder links angeben

Lieferbar im 1. Quartal 2023

Generation



NEU

BORT StabiloBasic Rückenbandage spezialweit mit Pelotte

Für die Versorgung kräftiger Körperformen



SPEZIALWEIT

REF 104 670 | Pos.Nr. 23.14.03.2xxx

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Anatomisch formgestrickt
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Sehr flache Konstruktion, dadurch unter der Kleidung kaum sichtbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm


FARBE: ■ silber

DAS BASIC-PLUS


- Zusätzliche elastische Bauchhebe-Zügel zur Entlastung der LWS **für kräftige Leibformen**
- Speziell konstruiertes Verschluss-System erleichtert das Anlegen
- Atmungsaktives Gestrick

GRÖSSEN

Umfang Taille

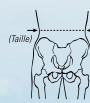

Größe 1	110 – 120 cm
Größe 2	120 – 130 cm
Größe 3	130 – 140 cm
Größe 4	140 – 150 cm

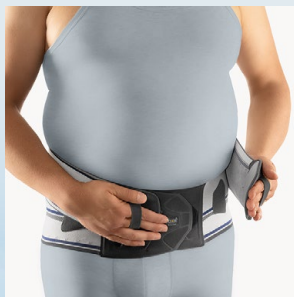

Med

NEU

BORT Plus- und Doppel-Plus-Größen bei Kniebandagen

Für die passgenaue Versorgung von außergewöhnlichen Bein-Proportionen

Mit der Einführung von Doppel-Plus-Größen erweitert BORT sein Angebot für besonders starke Oberschenkelumfänge.

Auch das Plus-Größen-Angebot bei Kniebandagen wurde ausgebaut.

GRÖSSEN KNEE	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29 cm	32 – 36 cm
Größe 2	29 – 33 cm	36 – 40 cm
Größe 2+	29 – 33 cm	40 – 44 cm
Größe 3	33 – 37 cm	40 – 44 cm
Größe 3+	33 – 37 cm	44 – 48 cm
Größe 4	37 – 41 cm	44 – 48 cm
Größe 4+	37 – 41 cm	48 – 52 cm
Größe 5	41 – 45 cm	52 – 56 cm
Größe 5+	41 – 45 cm	56 – 60 cm
Größe 5++	41 – 45 cm	60 – 64 cm
Größe 6	45 – 49 cm	60 – 64 cm
Größe 6+	45 – 49 cm	64 – 68 cm
Größe 6++	45 – 49 cm	68 – 72 cm
Größe 7	49 – 53 cm	68 – 72 cm
Größe 7+	49 – 53 cm	72 – 76 cm



NEU:
Doppel-Plus-Größen

Extraweiter Umfang
für ein noch breiteres
Versorgungsspektrum



BORT StabliGen® Eco
mit Haftband

REF 114 520 H

Pos.Nr. 05.04.01.0098

- Zusätzliche Doppel-Plus-Größen 5++ und 6++
- Zusätzliche Größen 7 und 7+



BORT StabliGen® Eco
mit Haftband kurz

REF 114 520 HK

Pos.Nr. 05.04.01.0098

- Zusätzliche Doppel-Plus-Größen 5++ und 6++
- Zusätzliche Größen 7 und 7+

Neue Größen



BORT Manu Basic®

REF 112 920

Pos.Nr. 05.07.02.0130

- Zusätzliche Größen xx-large und xx-large plus



BORT LumboXpress
Rückenbandage
mit Doppelverschluss

REF 112 600

Pos.Nr. 23.14.03.1043

- Zusätzliche Größe 8

NEUES DESIGN


BORT Polkurvengelenk für Knieorthesen

Angelehnt an die natürliche Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks

Innovativ: Das BORT Polkurvengelenk hat eine wandernde Drehachse.

Es kann somit den physiologischen Roll-Gleit-Bewegungsablauf des menschlichen Kniegelenks nachahmen.

Die Gelenklimitierung erfolgt werkzeugfrei.

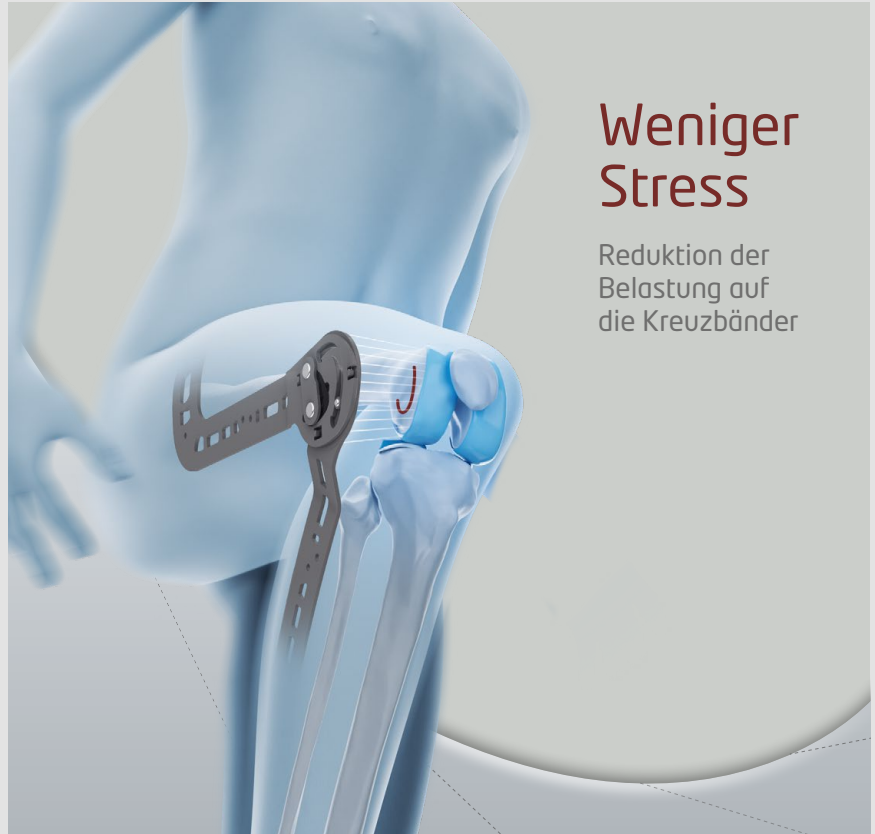

Weniger Stress

Reduktion der Belastung auf die Kreuzbänder



BORT StabuloPro® Knieorthese

REF 182 150

Pos.Nr. 23.04.03.1029

– Jetzt mit einstellbarem Polkurvengelenk



BORT Generation Knieorthese

REF 215 400

Pos.Nr. 23.04.03.1046

– Jetzt mit einstellbarem Polkurvengelenk



BORT GenuXpress

REF 100 700

Pos.Nr. 23.04.03.3057

– Jetzt mit einstellbarem Polkurvengelenk

– **NEU**
Zusätzliche Plus-Größen
small plus, medium plus,
large plus, x-large plus



BORT GenuXpress ACL

REF 100 800

Pos.Nr. 23.04.03.3080

– Optimiertes Gelenk

– **NEU**
Zusätzliche Plus-Größen
small plus, medium plus,
large plus, x-large plus

Weitere Knieorthesen mit BORT Polkurvengelenk

Produktmodifikationen

Vereinfachte Funktion



BORT EpiBasic Sport

[REF] 122 600 SP | Pos.Nr. 05.08.01.1054

NEUES DESIGN

- Positionierungshilfe in der Ellenbogenbeuge
- Flexible Dehnungszone im Ellenbogenbereich

Neue Farbe



BORT ManuStabilPro offene Form

[REF] 182 500 | Pos.Nr. 23.07.02.0014

NEU

Neue Farbe grau



BORT Vario Rückenbandage mit Pelotte

[REF] 112 610 | Pos.Nr. 23.14.03.3034

NEU

Neue Farbe grau

Freuen Sie sich auf das neue BORT Dekosystem!

Lieferbar ab Q2/2023.
Sprechen Sie Ihren Außendienst an.

Abbildung ähnlich. Nur solange der Vorrat reicht.

⊕ Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an: 07151/99200-0

BORT Lösungen erfüllen individuelle Anforderungen und Wünsche. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Außendienst beraten Sie hierzu umfassend und kompetent. Gerne vereinbaren wir einen persönlichen Termin mit Ihnen.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand Januar 2023.

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT GmbH | Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | Telefon (07151) 99200-0
Telefax (07151) 99200-50 | www.bort.com | medical@bort.com

M2012/2022-11/005 DE | Rev. 01

